


Art. HH 551 SERA
Sedile ribaltabile da muro.
Folding seat for shower.







Specifiche tecniche

Capacità di tenuta: 125 kg
Seduta in polipropilene dotata di fori per deflusso liquidi, montata su due profili in alluminio. I supporti sono incernierati a due piastre in acciaio inox dotate di fori per il fissaggio a muro con viti e tasselli (non forniti). Le due piastre sono coperte da scocche di polipropilene.

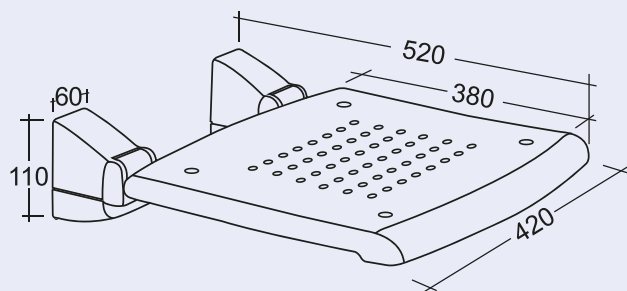

Scelta tipi di fissaggi

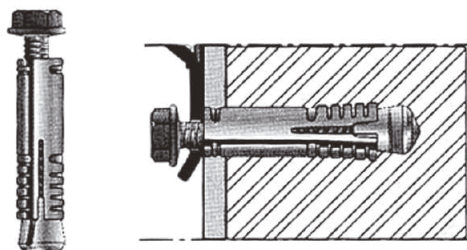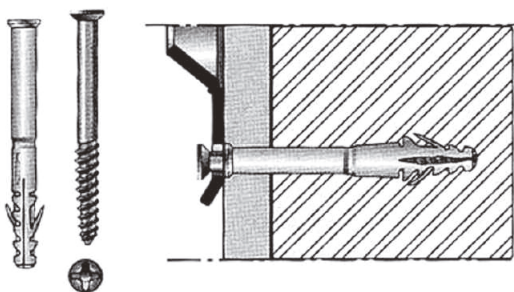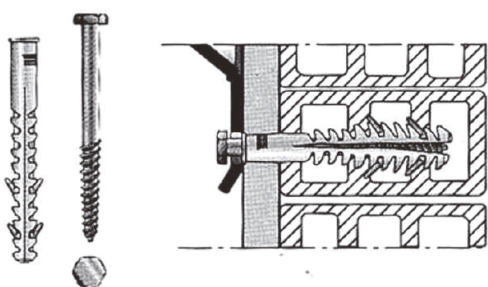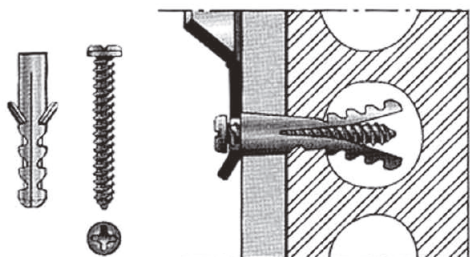

Tutta la gamma di accessori CIVITA CROMO è contraddistinta da un'estrema semplicità di installazione, operazione del tutto intuitiva che non necessita, peraltro, dell'utilizzo di particolari attrezzi o strumenti. Per non compromettere seriamente la funzionalità e l'efficacia degli ausili CIVITA CROMO, progettati e costruiti per sostenere agevolmente il carico di una persona, bisogna però porre particolare attenzione alla scelta del tipo di fissaggio in base alla muratura su cui si opera. Premesso quindi che i tasselli devono essere alloggiati in murature di buona resistenza, presentiamo di seguito alcuni esempi di installazione corredati da semplici proposte per la scelta del tipo di fissaggio a muro adeguato.

Non potendo verificare lo stato delle opere murarie e le procedure seguite, CIVITA CROMO declina qualunque responsabilità per installazioni difettose.

